# YOUR HEALTH & LIFE OPTION



## Аналізатор ШОЕ Vision Pro











EDTA 12/13mm×75mm 12/13mm×100mm

- Повністю автоматичний аналізатор, включаючи змішування
- ▶ Безпосереднє використання зразків EDTA, спеціальні пробірки не потрібні
- Результати, виражені в мм/годину
- Осідання в ЕDTA перераховується на осідання в цитраті математичною формулою розробленою ICSH
- Відображає криву ШОЕ, що надає більше інформації для клінічної діагностики
- Можливість закрити систему
- Швидкий тест, лише 20 хвилин для тесту



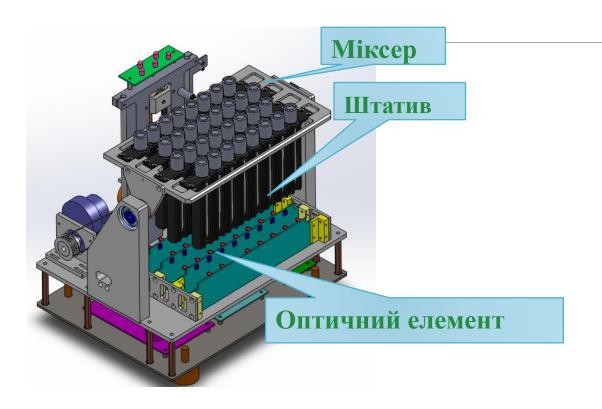

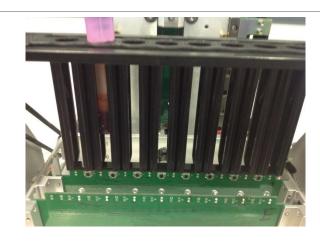



- ✓ Вимірювання проводиться кожні 10 сек, протягом 20 хв
- ✓ Сигнал потужних інфрачервоних світлодіодів проходить щонайменше через 3 етикетки
- ✓ ігнорується ліпідний ефект.



ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

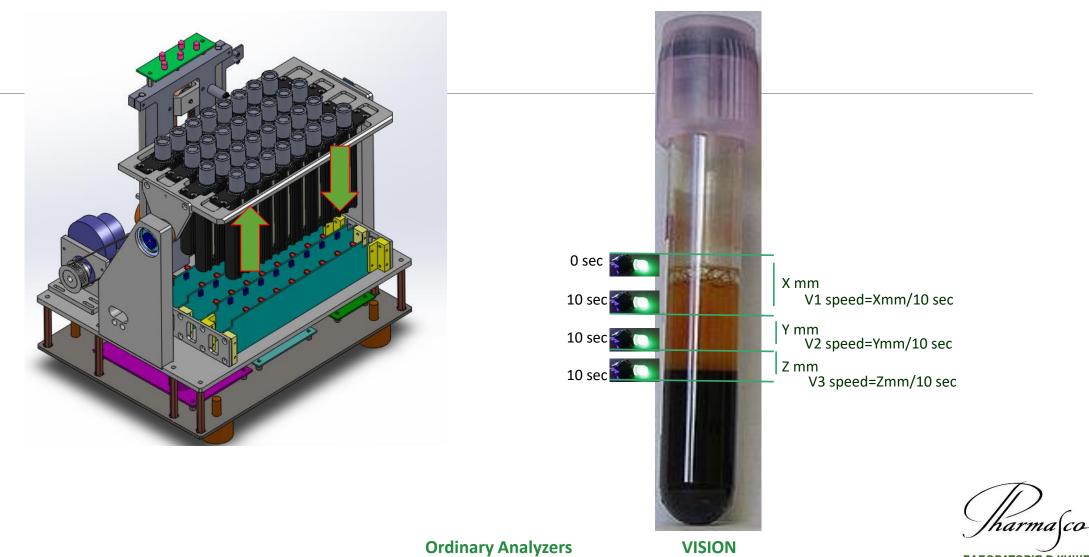

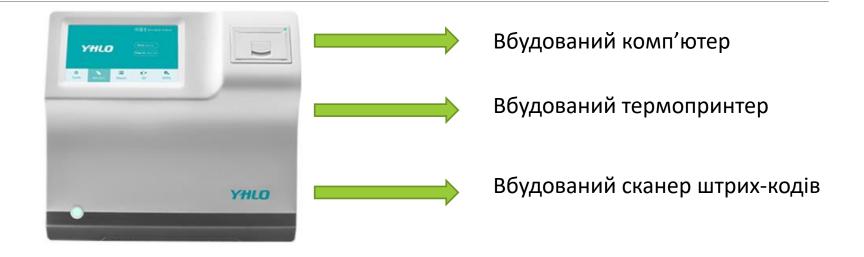

Розміри: 352мм x 365мм x 325мм